

miniCHEM

產品特色





miniCHEM 是一台結合生化、電解質及凝血功能的
多功能獸醫用生化分析儀。

不須再購賣額外的凝血或電解質分析儀，一機多用
提供完整的血液檢測需求。

生化套組最多可一次檢測 23 項數值，提供獸醫師
更完整的數值，幫助臨床診斷更加精準。



快速得到結果

12分鐘即刻得到結果。快速完成，把握診斷黃金期



容易操作

步驟簡單，容易上手



體積小

體積小巧，可攜帶不占空間



二合一

生化、凝血二合一
不用再多買凝血機



減少血液品質造成的干擾

內建品質校正，解決樣品溶血、脂血、黃疸等干擾問題



單次檢測最多項

單次最多可檢測23項生化數值，為市面上最多的檢測套組



直覺化的自動化程序

自動離心、檢測。全血、血清、血漿都可以直接使用




超微量的血液需求


只需50 μ L，小型動物不須再為血量煩惱



miniCHEM

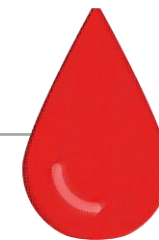

全血上機

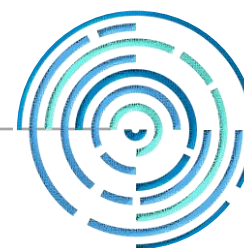

機內離心






血漿分析

Biochemistry





Coagulation

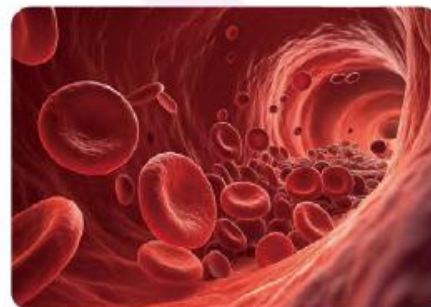

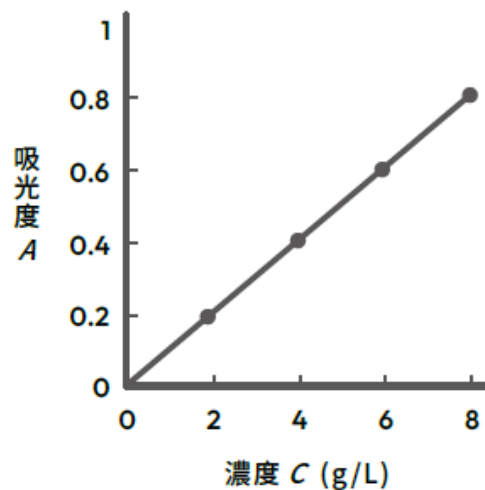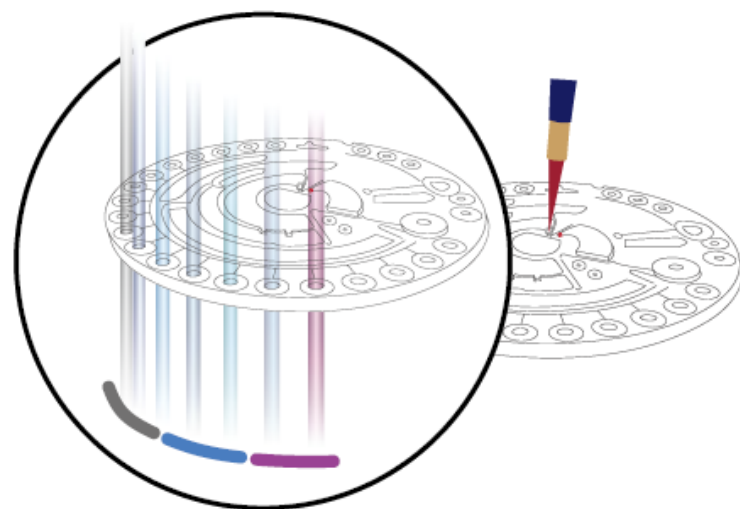

miniCHEM是透過分光光度法的原理，在裝有凍乾試劑的檢測檢測盤中加入樣本，通過高速離心至反應孔，反應後以一束單色光射入被檢測液體，透過被測液體的光信號被檢測後轉換成電信號，對該信號進行適當轉換及運算處理，參照標準曲線，從而可得到被測液體的濃度。

微流道技術檢測盤設計

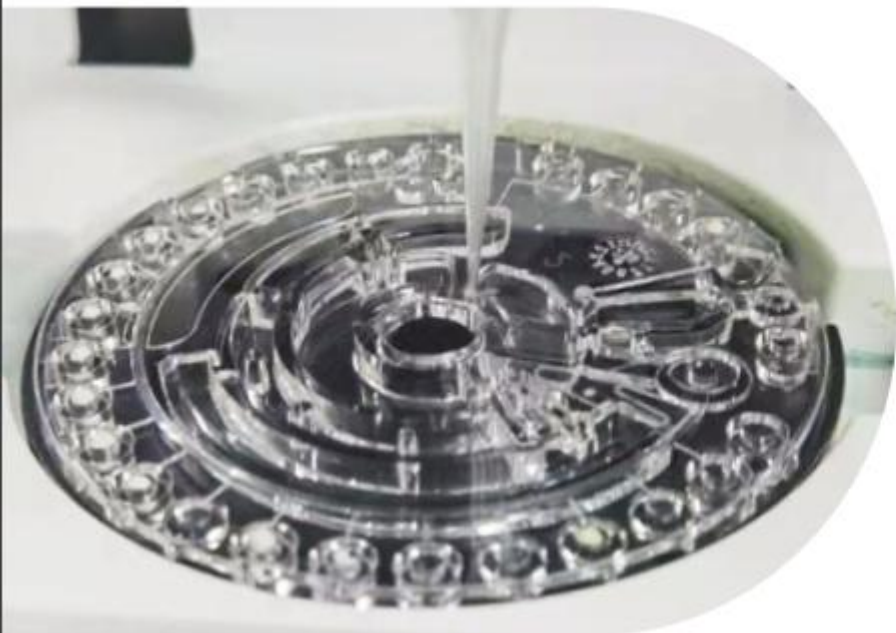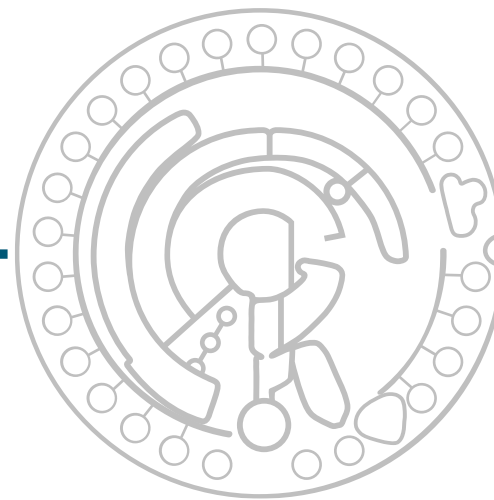

更省時、更容易上手

miniCHEM 檢測盤採用微流道技術，只要使用微量血液樣本即可在獨家設計的微流道盤片上一次進行離心、稀釋、反應與檢測，並同時完成多種項目的檢測。

加樣

離心

血漿分離
及定量



混合

輸送

反應偵測

微流道技術檢測盤設計

通用生化盤結構組成

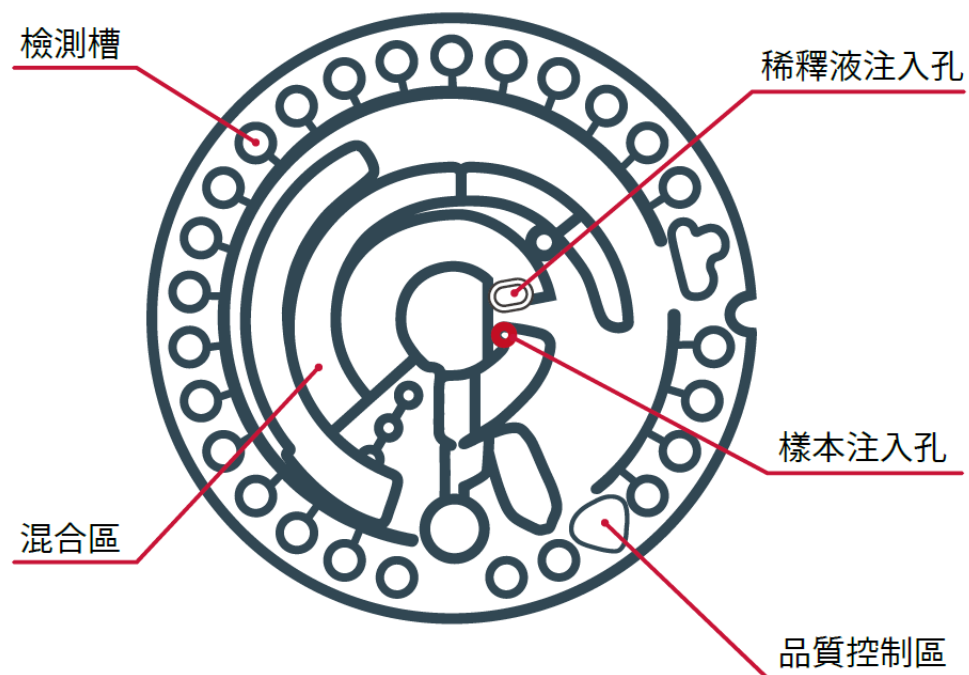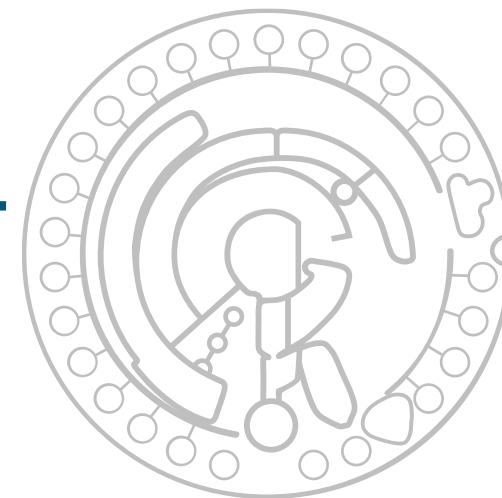

產品規格

儀器規格：	
原理	光電比色法
檢體形式	全血、血清、血漿
試劑種類	凍乾試劑
檢體量	生化：140；凝血：180μL
檢測時間	12 分鐘
可用物種	犬、貓、兔、鼠、豬、猴子、蜥蜴、馬、牛、羊、烏龜等
顯示螢幕	5 吋觸控螢幕
尺寸	309mm×218mm×208mm
重量	3.45 kg
電源供應	110V-240V, 50/60Hz
資料傳輸	WiFi, USB, LAN
資料列印	內建熱感紙印表機，可連接電腦



操作步驟

Blood Chemistry Testing Report
 Puppy Animal Hospital
 Address: No. 25, Wu Xing 5th Rd., Xue Yuan City, Hainan, China
 Phone: 0898-98888888

Item	Result	Reference Range	Unit	Normal	Unit
ALB	3.5g/dL	3.5-5.0			
ALT	1.0U/L	0.0-2.0			
AST	45.0U/L	0.0-40.0			
BUN	10.0mg/dL	0.0-20.0			
Ca	1.0mmol/L	1.0-1.5			
CREA	0.5mg/dL	0.0-1.0			
GLU	100mg/dL	70-120			
TP	6.0g/dL	5.0-7.0			
ALP	100U/L	0-100			
PT	1.0sec	0.5-1.5			
APTT	1.0sec	0.5-1.5			
INR	1.0	0.5-1.5			
WBC	10.0x10 ⁹ /L	5.0-10.0			
NEUTRO	60%	50-70			

Disclaimer: This report is only for reference. The results of the test are not a substitute for a clinical diagnosis. The results of the test are not a substitute for a clinical diagnosis. The results of the test are not a substitute for a clinical diagnosis.


bioguard
 Printed Date: 2023/03/15



12分鐘取得結果

操作步驟

1

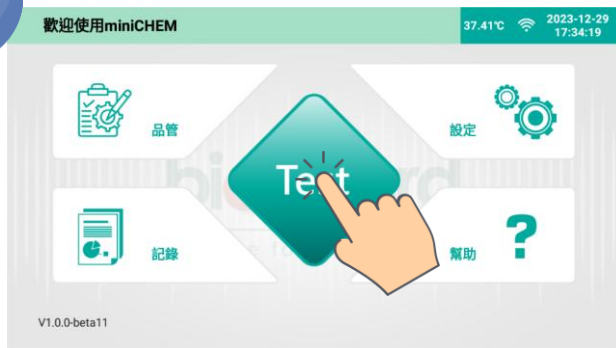


點選"Test"

2



掃描QR code

3

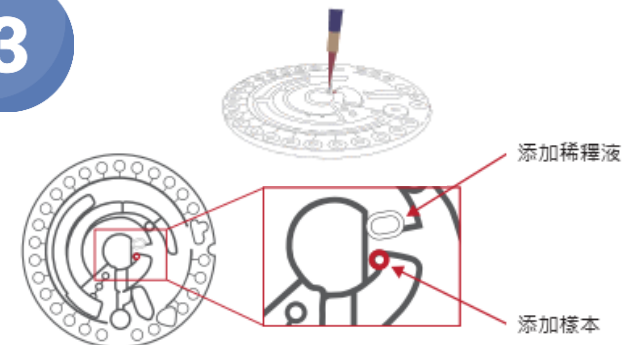

加入樣本及稀釋液

4

輸入樣本資訊

5



等待測試

6

項目	結果提示	檢測結果	參考範圍	單位
ALB	↑	>6.0	2.2-4.0	g/dL
TP	↑	>10.0	5.7-8.9	g/dL
ALP		23.7	20.0-111.0	U/L
ALT		4.5	0.0-130.0	U/L
TBIL	↑	5.0	0.0-0.9	mg/dL

結果呈現

凝血套組

CH01-1 凝血功能4項套組

FIB, TT, PT, APTT

CH03-1 綜合檢查23項套組

ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, Ca, CK, CRE, DBIL, GGT, GLU, PHOS, TBA, TBIL, TCH, CO₂, TP, *A/G, *AST/ALT, *GLOB, *IBIL, *BUN/CRE

CH04-1 健康檢查16項套組

ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, Ca, CK, CRE, GLU, PHOS, TBIL, TCH, TP, *A/G, *GLOB, *BUN/CRE

CH05-1 肝功能17項套組

ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, CK, TP, TG, TCH, DBIL, LDH, *GLOB, *A/G, *AST/ALT, *IBIL

CH06-1 腎功能11項套組

ALB, PHOS, BUN, CRE, CO₂, Ca, GLU, Na⁺, K⁺, Cl⁻, *BUN/CRE

CH07-1 離子7項套組

Ca, Cl⁻, CO₂, Na⁺, K⁺, Mg, PHOS

CH08-1 犬發炎6項套組

AMY, BUN, CRE, LPS, CRP, *BUN/CRE

CH09-1 糖尿病4項套組

GLU, TG, TCH, FRU(GSP)

CH10-1 貓發炎12項套組

ALB, ALP, TBA, BUN, CRE, GGT, f-SAA, LPS, TP, *BUN/CRE, *GLOB, *A/G

CH11-1 NSAID套組

ALP, ALT, AST, BUN, CRE, *BUN/CRE

CH12-1 馬檢測17項套組

ALB, ALP, AST, BUN, Ca, CK, CRE, GLU, GGT, K⁺, TBIL, CO₂, TP, LDH, A/G, *GLOB, *BUN/CRE

CH14-1 鳥禽及爬蟲20項套組







ALB, ALT, AST, BUN, LDH, TBA, Ca, CK, Cl⁻, GLU, K⁺, Na⁺, PHOS, TCH, TP, UA, *GLOB, *A/G, *Na/K, *AST/ALT

生化套組



高度可靠性

檢測結果與其他主流品牌相比
呈現高度一致性

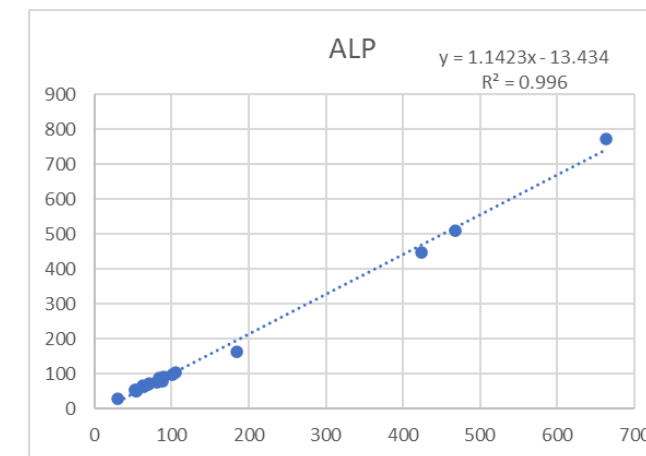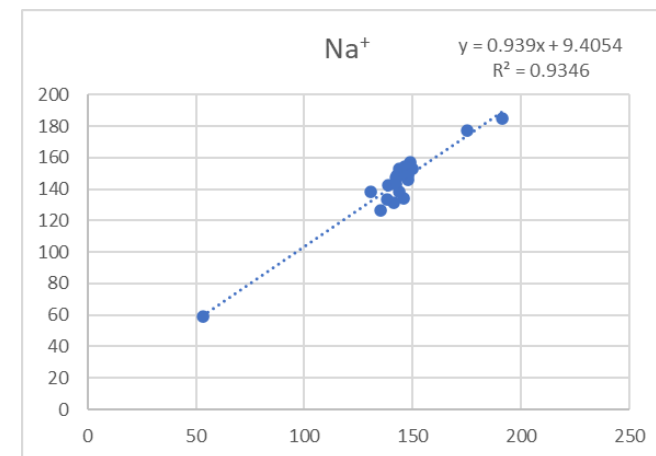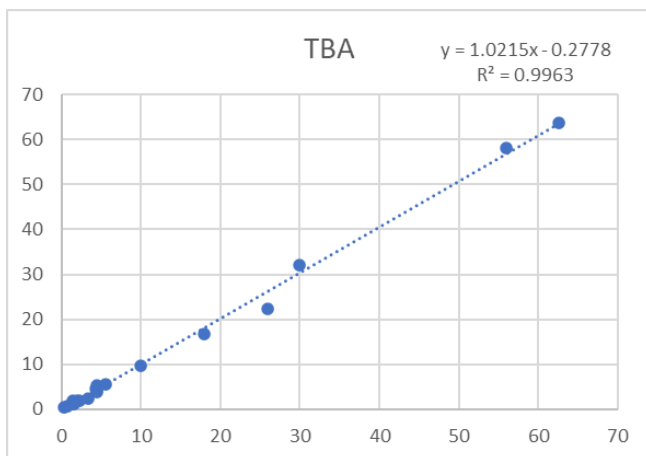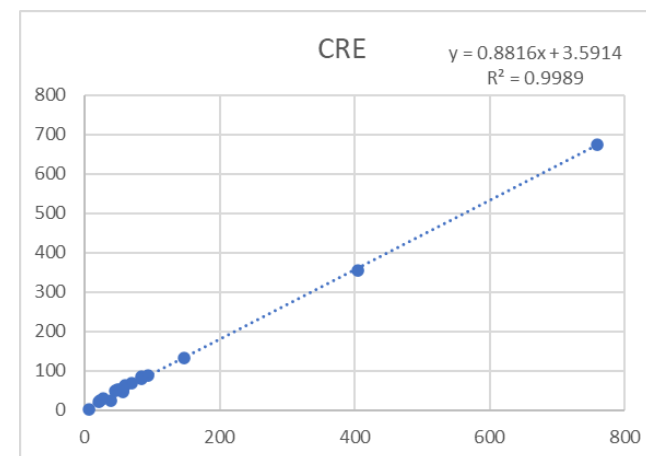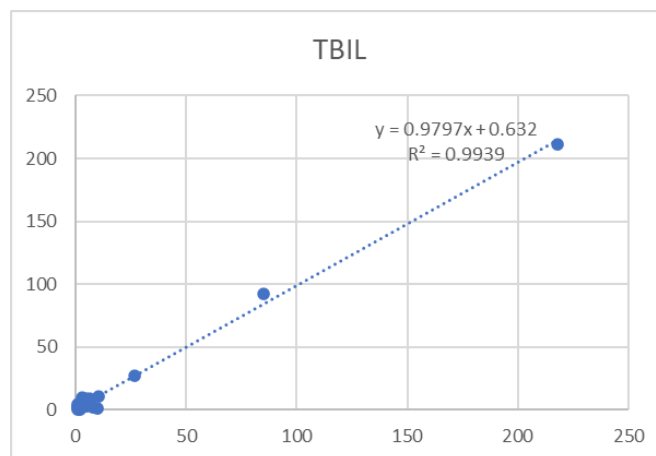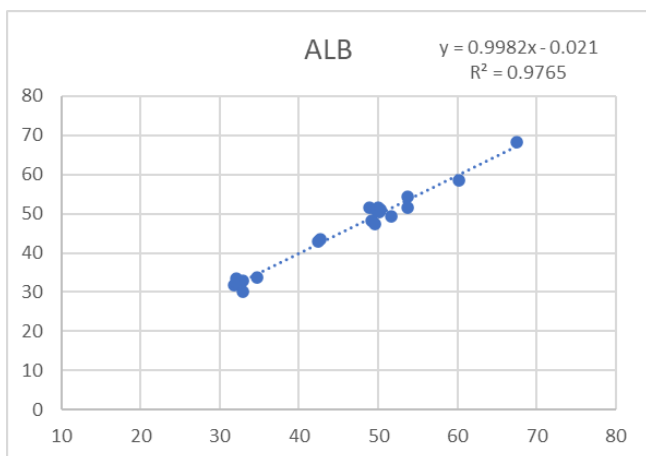



符合獸醫師對生化儀的
所有需求



合約方案

特選會員合約方案

百衛優質精選客戶專屬



- 初次下訂**1萬**耗材
- 每年訂購**3萬**耗材(不含初次訂購)
- 3年滿**10萬**取得儀器所有權

·無綁約壓力

·低門檻入手

·經濟的耗材費用

·合約會員再享優惠

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !